

3/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013408560 **Image available**
WPI Acc No: 2000-580498/*200055*
XRPX Acc No: N00-429663

Device for mixing water and concentrate for haemodialysis has a solution bag containing a saturated medicinal concentrate

Patent Assignee: FEDERAL MEDICAL CO LTD (MEDI-N); HO K H (HOKH-I)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 20008860	U1	20000817	DE 2000U2008860	U	20000517	200055 B

Priority Applications (No Type Date): DE 2000U2008860 U 20000517

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 20008860	U1	16	A61M-001/14		

Abstract (Basic): *DE 20008860* U1

NOVELTY - Device for mixing water and concentrate has at least one solution bag (1) containing a saturated medicinal concentrate (2). One tube (3) between the reverse osmosis (RO) water and the solvent bag (1) is connected to the outlet (51) of the RO water outlet of the dialysis machine (5) and is used to feed RO water into the solvent bag (1) to dissolve the crystallized concentrate (2) to produce saturated A or B dialyzate. Another tube (4) joins the solvent bag (1) and a suction pipe (52 or 53) of the A dialyzate (or B dialyzate) of the dialysis machine (5), which is then mixed with the RO water and this mixture is fed into the dialysis machine (5).

DETAILED DESCRIPTION - Preferred Features: The concentrate (2) comprises medicinal products in a suitable mixing ratio. Small quantities are mixed with RO water to produce high concentrations of A dialyzate (or B dialyzate) for the blood purification process and each unit comprises the same constituents in the same ratio. Water is removed from the solution by drying to form a saturated crystallized concentrate (2).

USE - For haemodialysis.

ADVANTAGE - Bacterial contamination is prevented, the quality of hemodialysis is improved, and running costs are low

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a schematic view of the device.

solution bag (1)
concentrate (2)
tubes (3, 4)
dialysis machine (5)
outlet (51)
suction pipe (52, 53)
pp; 16 DwgNo 1/5

Title Terms: DEVICE; MIX; WATER; CONCENTRATE; HAEMODIALYSIS; SOLUTION; BAG; CONTAIN; SATURATE; MEDICINE; CONCENTRATE

Derwent Class: P34

International Patent Class (Main): A61M-001/14

File Segment: EngPI

3/5/2

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007595133

WPI Acc No: 1988-229065/198833

XRAM Acc No: C88-102291

XRPX Acc No: N88-174301

System for preparing soln. for medical use - by dissolving powder in
liquid to form conc. soln. subsequently further diluted

Patent Assignee: GAMBRO AB (GAMB)

Inventor: CARLSSON P A V; JOENSSON D; JOENSSON S A; JOENSSON U L P;
KNUTSSON S L; TRYGGVASON R; CARLSSON P O A; JONSSON D; JONSSON S A;
JONSSON U L P

Number of Countries: 016 Number of Patents: 015

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
EP 278100	A	19880817	EP 87118987	A	19871221	198833	B
AU 8811347	A	19880811				198839	
SE 8700461	A	19880807				198839	
SE 8702234	A	19880807				198839	
BR 8800184	A	19880920				198842	
BR 8800439	A	19880920				198842	
US 4784495	A	19881115	US 87130879	A	19871210	198848	
CA 1286284	C	19910716				199133	
ES 2023079	A	19920101				199206	
SE 467142	B	19920601	SE 872234	A	19870527	199225	
EP 278100	B1	19920715	EP 87118987	A	19871221	199229	
DE 3780440	G	19920820	DE 3780440	A	19871221	199235	
			EP 87118987	A	19871221		
ES 2023079	T3	19931201	EP 87118987	A	19871221	199401	
KR 9508519	B1	19950731	KR 881162	A	19880206	199718	
DE 8718135	U1	19970430	DE 87U18135	U	19871221	199723	
			EP 87118987	A	19871221		

Priority Applications (No Type Date): SE 873626 A 19870918; SE 87461 A
19870206; SE 872234 A 19870527; SE 873120 A 19870811

Cited Patents: 2.Jnl.Ref; A3...8950; EP 160272; No-SR.Pub; US 3560380; US
3560389

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 278100	A	E	25		
Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL					
US 4784495	A		23		
EP 278100	B1	E	38	A61M-001/16	
Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL					
DE 3780440	G			A61M-001/16	Based on patent EP 278100
ES 2023079	T3			A61M-001/16	Based on patent EP 278100
DE 8718135	U1		38	A61K-033/14	application EP 87118987
SE 467142	B			B01F-001/00	
KR 9508519	B1			A61M-001/14	

Abstract (Basic): EP 278100 A

Medical fluid is prepd. by mixing a powdered concentrate with
water. The system for mixing includes a vessel contg. the concentrate
and a first fluid conduit having a first end communicating with a

source of water and a second end delivering the prepd. soln. A second conduit has a first end also communicating with the water source and a second end connected to the inlet of the vessel holding the concentrate to introduce water into the powder to produce a concentrate of dissolved powder in water.

A third conduit is connected to the outlet of the vessel and to a midpoint in the first conduit for introducing the concentrate into the flowing water. A measuring device in the first conduit downstream of the midpoint measures the compsn. of the prepd. soln. and this is used to control a flow regulator in the third conduit for controlling the flow of concentrate from the vessel.

USE/ADVANTAGE - System is used to prepare a fluid for medical use, esp. for haemodialysis, but also possibly haemofiltration and haemodiafiltration. The system minimises pptn. problems and risk of bacterial growth.

Title Terms: SYSTEM; PREPARATION; SOLUTION; MEDICAL; DISSOLVE; POWDER; LIQUID; FORM; CONCENTRATE; SOLUTION; SUBSEQUENT; DILUTE

Derwent Class: J01; P34

International Patent Class (Main): A61K-033/14; A61M-001/14; A61M-001/16; B01F-001/00

International Patent Class (Additional): A61K-009/08; A61K-033/06; A61M-001/34; A61M-005/00; A61M-005/31; B01D-013/00; B01F-003/12; B01F-015/04; B01J-008/02; B31B-025/00; G05D-011/13

File Segment: CPI; EngPI



⑩ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**
⑩ **DE 200 08 860 U 1**

⑥ Int. Cl. 7:
A 61 M 1/14

②① Aktenzeichen:	200 08 860.2
②② Anmeldetag:	17. 5. 2000
④⑦ Eintragungstag:	17. 8. 2000
④③ Bekanntmachung im Patentblatt:	21. 9. 2000

DE 200 08 860 U 1

⑦③ Inhaber:


Ho, Kuo Hsin, Sanchung, Taipeh, TW; Federal
Medical Co., Ltd., Taipeh/T'ai-pei, TW

⑦④ Vertreter:

Haft, von Puttkamer, Berngruber, Czybulka, 81669
München

⑤④ Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse

⑤⑦ Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse, die aufweist:
wenigstens einen Lösungsbeutel (1), die innen übersättigte Heilmittel-Konzentrate (2) enthält,
einen ersten Schlauch (3), der sich zwischen dem Reversosmose(RO)-Wasser und dem Lösungsbeutel (1) befindet und der an einen Ausgang (51) von RO-Wasserausgang des Dialysegeräts (5) angeschlossen ist und über den das RO-Wasser in den Lösungsbeutel (1) zugeführt ist, um die kristallisierten Konzentrate (2) im Lösungsbeutel (1) zu gesättigtem A- oder B-Dialysat aufzulösen, und einen zweiten Schlauch (4), der zwischen dem Lösungsbeutel (1) und einem Saugrohr (52 oder 53) des A-Dialysats(oder B-Dialysats) des Dialysegeräts (5) angeschlossen ist, wobei die Pumpe (54 oder 55) innerhalb des Dialysegeräts (5) die gesättigte Lösung geeigneter Menge absaugt, die dann mit dem RO-Wasser gemischt ist und das Gemischte ins Dialysegerät (5) zur Anwendung der Hämodialyse eintritt.

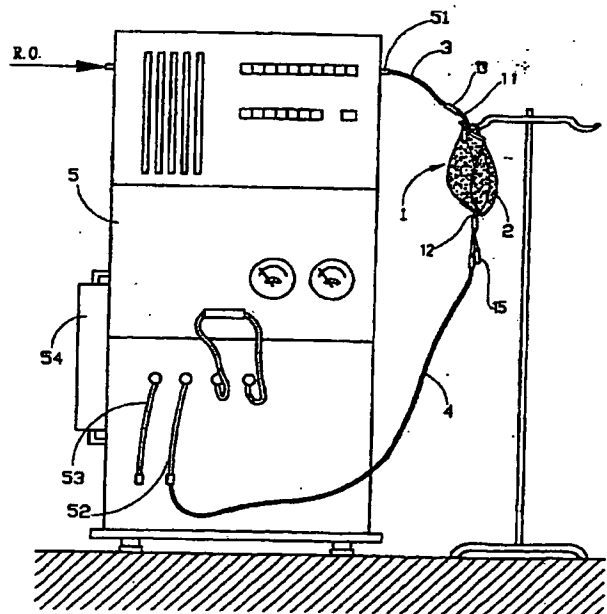

DE 200 08 860 U 1

Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse

Die vorliegenden Erfindung bezieht sich auf eine
5 Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die
Hämodialyse gemäß Oberbegriff des Schutzanspruchs 1.

Beim Blutreinigungsverfahren muss das Dialysat oder die
sogenannte Waschlösung gebraucht werden. Um es leichter
10 aufzubewahren weist das Dialysat zwei Lösungen (A- und B-
Dialysat) auf, die beim Blutreinigungsverfahren
gleichzeitig in bestimmtem Verhältnis vom Dialysegerät
gepumpt werden, wobei die Hämodialyse jeweils 4-5 Stunden
dauert. Die beschriebene A-Dialysat ist eine stark saure
15 Minerallösung, die Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium,
Natriumacetat, Acetat o.ä. enthält, die nicht leicht
verkeimt sind, wobei das Mischungsverhältnis schwierig
steuerbar ist. Das B-Dialysat ist eine Nährlösung, die zwei
Lösungen von Natriumchlorid und Natriumhydrogencarbonat
20 enthält, die leichter verkeimt sind. Bei der
Dialysebehandlung findet der Stoff- und
Flüssigkeitsaustausch zwischen den oben erwähnten A- und B-
Dialysaten und das Blut der Patienten statt, damit sich die
Nahrung und das Mineral im Blut in optimalen Zustand
25 befinden, während die toxischen Substanzen (z.B. Harnsäure)
aus dem Blut eliminiert werden können.

Das A-Dialysat besteht aus mehreren Substanzen und ihre
Existenzformen sind unterschiedlich. Wenn es pulverförmig
30 zur Verwendung ausgebildet sind, wird die Lösung mit
geeignetem Verhältnis schwierig erhalten. Daher wird 70%
Reinwasser mit Pulver gemischt, um eine Mischlösung
geeigneten Verhältnisses zu bereiten, die in Behältern
gepackt wird, während das B-Dialysat zur bequemen Anwendung
35 auch in derselben Weise gepackt. Aber das B-Dialysat ist
ein Schwach-Base-Nähstoff und somit sehr leicht verkeimt.

Ein Kubikzentimeter des in flüssigem Zustand befindlichen B-Dialysats enthält über 10.000 Bakterien, wobei das Saugrohr bei Anwendung direkt in das B-Dialysat eingesteckt wird, um sie zu pumpen. Deshalb weist der Behälter für B-

5 Dialysat eine Öffnung auf, die langfristig in Kontakt mit der Luft steht, wodurch eine Verkeimung leichter hergestellt wird und somit die Gesundheit der Patienten vielmehr beeinflusst.

10 Darüber hinaus wird das Dialysat in Gallonenbehälter gepackt. Jede Dialysebehandlung braucht jeweils 4000-7500 Kubikzentimeter des A- und B-Dialysats, wodurch die wegzuwerfenden Behälter sehr viel sind. Außer eines großen Vorratsraums für die Behälter ist das Gewicht beim

15 Transport sehr schwer. Das Wegwerfen von Behältern ist auch kostenaufwendig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die

20 Hämodialyse zu schaffen, wobei das Dialysat als körnige Konzentrate hergestellt ist, die in luftdichten Beuteln aufbewahrt sind, die direkt mit den Beförderungsschläuchen für Dialysat verbunden sind, sodass die Ansteckung von Bakterien zu vermeiden ist und somit die Qualität der

25 Hämodialyse erhöht werden kann.

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse zu schaffen, die auf alle Sorten von

30 Dialysegeräten anwendbar ist, wodurch die Anwendungskosten verringert werden können und somit sich die erfindungsgemäße Mischvorrichtung noch praktischer zeigt.

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht

35 darin, eine Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse zu schaffen, durch das das

Verpackungsvolumen und die Transportkosten für Dialysat erheblich reduziert werden können, wobei die Kosten für Abfallentsorgung auch viel gespart werden kann.

- 5 Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß gelöst durch eine Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse, die die in Ansprüchen 1 bis 3 angegebenen Merkmale besitzt.
- 10 Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden deutlich beim Lesen der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen, die auf die beigefügten Zeichnungen Bezug nehmen; es zeigen:
- 15 Fig. 1 eine schematische Darstellung einer perspektivischen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 2 ein Systemflussdiagramm der vorliegenden Erfindung;
- 20 Fig. 3 eine erste Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lösungsbeutels;
- Fig. 4 eine zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lösungsbeutels; und
- 25 Fig. 5 ein weiteres Systemflussdiagramm der vorliegenden Erfindung.
- 30 Bezugnehmend auf den Fig. 1 und 2 weist die erfindungsgemäße Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse wie folgt auf:
- mindestens einen Lösungsbeutel 1, in der sich übersättigte kristallisierte (sandförmige oder
- 35 tablettenförmige) Konzentrate 2 befinden,

einen ersten Schlauch 3, der sich zwischen dem Reversosmose (RO)-Wasser und dem Lösungsbeutel 1 befindet und der an einen Ausgang 51 von RO-Wasserausgang des Dialysegeräts 5 angeschlossen ist und über den das RO-Wasser in den Lösungsbeutel 1 zugeführt ist, um die kristallisierten Konzentrate 2 im Lösungsbeutel 1 zu gesättigtem A- oder B-Dialysat aufzulösen, und einen zweiten Schlauch 4, der zwischen dem Lösungsbeutel 1 und einem Saugrohr 52 (oder 53) des A-Dialysats (oder B-Dialysats) des Dialysegeräts 5 angeschlossen ist, wobei die Pumpe 54 (oder 55) innerhalb des Dialysegeräts 5 die gesättigte Lösung geeigneter Menge absaugt, die dann mit dem RO-Wasser gemischt ist und das Gemischte ins Dialysegerät 5 zur Anwendung der Hämodialyse eintritt.

Die Konzentrate 2 besteht aus Heilmitteln mit geeignetem Mischungsverhältnis und wird anschließend mit RO-Wasser geringer Menge zu dem beim Blutreinigungsverfahren verwendeten A-Dialysat (oder B-Dialysat) der hohen Konzentration gerührt, von der jede Einheit denselben Bestandteil und dasselbe Verhältnis besitzt. Danach wird mittels Methoden vom Frier-Abtrocknen oder Spritz-Abtrocknens erst entwässert und dann ist körnig hergestellt oder zu übersättigten kristallisierte Konzentrat 2 verdichtet.

Daher enthält jedes kristallisiertes Körnchen der beim Blutreinigungsverfahren verwendeten Konzentrate 2 dieselben chemischen Bestandteile, wodurch das RO-Wasser beim Blutreinigungsverfahren direkt hinzugefügt und mit den Konzentraten 2 zu sich in gesättigtem Zustand befindender Lösung gemischt werden kann, das gleich zur Verfügung des Dialysegeräts 5 gepumpt werden kann. Deshalb wird die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung von Bakterien verringert werden können.

In den Fig. 3 und 4 ist gezeigt, dass der Lösungsbeutel 1 aus weichem Kunststoff hergestellt ist und an geeigneter Stelle ihres Randes einen Eingabeschlauch 11 und einen
5 Ausgabeschlauch 12 aufweist, wobei der Eingabeschlauch 11 mindestens einen Anschluss 13 zur Verbindung mit dem RO-Wasserschlauch 3 besitzt, während der Ausgabeschlauch 12 mindestens einen Filter 14 besitzt, unter dem mindestens ein Anschluss 15 zur Verbindung mit dem Saugrohr 52 (oder
10 53) des A- oder B-Dialysats des Dialysegeräts 5 vorgesehen ist.

Der Eingabeschlauch 11 und der Ausgabeschlauch 12, wie in Fig. 3 gezeigt, weist jeweils zwei Anschlüsse 13, 13' und
15 15, 15' (der einer ist als Stecker und der andere als Buchse ausgebildet) auf, wobei die Anschlüsse 13, 15 als konischer Anschluss intravenöser Injektionsröhre ausgebildet ist, während die Anschlüsse 13', 15' als dem
Ausgang 51 des RO-Wassers des Dialysegeräts 5 und den
20 Saugrohren 52, 53 entsprechender Anschluss ausgebildet ist, wodurch eine praktische Anpassung zu allen Sorten von Dialysegeräten 5 erreicht werden kann.

Aus Fig. 5 ist ersichtlich, dass das A-Dialysat auf
25 mindestens zwei Lösungsbeutel 1 verteilt sind, die unterschiedliche Heilmittel enthalten, wobei die Ausgabeschläuche 12 der zwei Lösungsbeutel 1 unten einen geeigneten Durchfluss jeder Lösung steuern, die anschließend zueinander gemischt ist und mittels der Pumpe
30 54 in bestimmter Menge ins Dialysegerät 5 gepumpt wird. Um die genau gemischten Heilmittel des Dialysats zu bekommen, kann eine Mengenregelvorrichtung 56 unter dem Ausgabeschlauch 12 des Lösungsbeutels 1 zur Verfügung der Hämodialyse vorgesehen sein.

35

- Da die Konzentrate 2 im Lösungsbeutel 1 sandförmig oder tablettenförmig übersättigte kristallisierte Konzentrate sind, kann etwa 70% des Volumens oder des Gewichts zur praktischen Aufbewahrung und Transportierung reduziert werden als das herkömmliche flüssige Dialysat. Darüber hinaus weist der Lösungsbeutel 1 geeignete Anschlüsse 13, 15 auf, die leicht mit dem Dialysegerät 5 verbunden sein können, ohne andere Vorrichtungen extra vorzusehen. Die übersättigten Konzentrate 2 können mittels der Einfüllung des RO-Wassers schnell zu 100% gesättigter Lösung aufgelöst werden, die dann über das Absaugrohr ins Dialysegerät gepumpt und mit dem RO-Wasser (RO-Wasser: A-Dialysat: B-Dialysat = 34: 1: 1.5) verdünnt wird.
- 15 Da der Eingabeschlauch 11 des Lösungsbeutels 1 direkt an die RO-Wasserleitung und der Ausgabeschlauch 12 an die Saugrohre 52, 53 des Dialysegeräts 5 angeschlossen ist, dann können die Konzentrate 2 im Lösungsbeutel 1 bei Anwendung mit dem RO-Wasser aufgelöst werden, wodurch eine 100% gesättigte Lösung hergestellt wird. Mittel des Filters 14 können die noch nicht aufgelösten Konzentrate 2 und die makromolekularen Bakterien gefiltert werden, die dann gleich von Saugrohren 52, 53 des Dialysegeräts 5 abgesaugt werden, sodass die Ansteckung von Bakterien zu vermeiden ist und somit die Qualität der Dialyse verbessert werden kann.

- Die Zusammensetzung der erfindungsgemäßen Mischvorrichtung ist einfach und leicht zu verwenden, indem der oben genannte Lösungsbeutel 1 und das Dialysegerät 5 in Serienverbindung montiert sind. Außerdem ist die Lösungsbeförderung der Dialysebehandlung völlig verschlossen durchgeführt, wobei die Konzentrate 2 gleich nach ihrer Auflösung ins Dialysegerät 5 gepumpt werden, sodass ihr flüssiger Zustand sehr kurz ist und die Lösung in keiner Berührung mit der äußeren Luft steht, um die

- 7 - 17.05.00

Ansteckung und das Wachstum von Bakterien zu vermeiden (Die Menge von lebendigen Bakterien beträgt etwas 60 in 100 Gram der erfindungsgemäßen B-Lösung, während Ein Kubikzentimeter der sich in flüssigem Zustand befindlichen B-Dialysat über
5 10.000 Bakterien enthält. Darüber hinaus ist der Lösungsbeutel 1 aus weichem(r) Kunststoff oder Gummi hergestellt, während sich die Konzentrate 2 in trockenem Zustand befindet, sodass die Aufbewahrungsraum und die Transportkosten für Lösungsbeutel 1 erheblich reduziert
10 werden können, wobei die Kosten für Abfallentsorgung auch viel gespart werden kann.

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, vielmehr ergeben sich für
15 den Fachmann im Rahmen der Erfindung vielfältige Abwandlungs- und Modifikationsmöglichkeiten. Insbesondere wird der Schutzzumfang der Erfindung durch die Ansprüche Anspruch festgelegt.

DE 200 08 860 U1

Bezugzeichenliste

	1	Lösungsbeutel
	2	Konzentrat
5	3	RO-Wasserschlauch
	4	zweiter Schlauch
	5	Dialysegerät
	11	Eingabeschlauch
	12	Ausgabeschlauch
10	13	Anschluss
	13'	Anschluss
	14	Filter
	15	Anschluss
	15'	Anschluss
15	51	Ausgang
	52	Saugrohr
	53	Saugrohr
	54	Pumpe
	55	Pumpe
20	56	Mengenregelvorrichtung

- 9 17.05.00

Schutzanspruch

1. Mischvorrichtung von Wasser und Konzentrat für die Hämodialyse, die aufweist:
 - 5 wenigstens einen Lösungsbeutel (1), die innen übersättigte Heilmittel-Konzentrate (2) enthält, einen ersten Schlauch (3), der sich zwischen dem Reversosmose(RO)-Wasser und dem Lösungsbeutel (1) befindet und der an einen Ausgang (51) von RO-Wasserausgang des
 - 10 Dialysegeräts (5) angeschlossen ist und über den das RO-Wasser in den Lösungsbeutel (1) zugegeführt ist, um die kristallisierten Konzentrate (2) im Lösungsbeutel (1) zu gesättigem A- oder B-Dialysat aufzulösen, und einen zweiten Schlauch (4), der zwischen dem
 - 15 Lösungsbeutel (1) und einem Saugrohr (52 oder 53) des A-Dialysats(oder B-Dialysats) des Dialysegeräts (5) angeschlossen ist, wobei die Pumpe (54 oder 55) innerhalb des Dialysegeräts (5) die gesättigte Lösung geeigneter Menge absaugt, die dann mit dem RO-Wasser gemischt ist und
 - 20 das Gemischte ins Dialysegerät (5) zur Anwendung der Hämodialyse eintritt.
2. Mischvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - 25 dass die Konzentrate (2) aus Heilmitteln mit geeignetem Mischungsverhältnis besteht und anschließend mit RO-Wasser geringer Menge zu dem beim Blutreinigungsverfahren verwendeten A-Dialysat (oder B-Dialysat) der hohen Konzentration gerührt wird, von der jede Einheit denselben
 - 30 Bestandteil und dasselbe Verhältnis besitzt, worauf die Lösung mittels Methoden vom Abtrocknen erst entwässert ist und anschließend als übersättigtes kristallisiertes Konzentrat (2) ausgebildet ist.
- 35 3. Mischvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

DE 200 08 880 U1

- dass der Lösungsbeutel (1) aus weichem Kunststoff hergestellt ist und an geeigneter Stelle ihres Randes einen Eingabeschlauch (11) und einen Ausgabeschlauch (12) aufweist, wobei der Eingabeschlauch (11) mindestens einen
- 5 Anschluss (13) zur Verbindung mit dem RO-Wasserschlauch (3) besitzt, während der Ausgabeschlauch (12) mindestens einen Filter (14) besitzt, unter dem mindestens ein Anschluss (15) zur Verbindung mit dem Saugrohr (52 oder 53) des A- oder B-Dialysats des Dialysegeräts (5) vorgesehen ist.

17.05.00

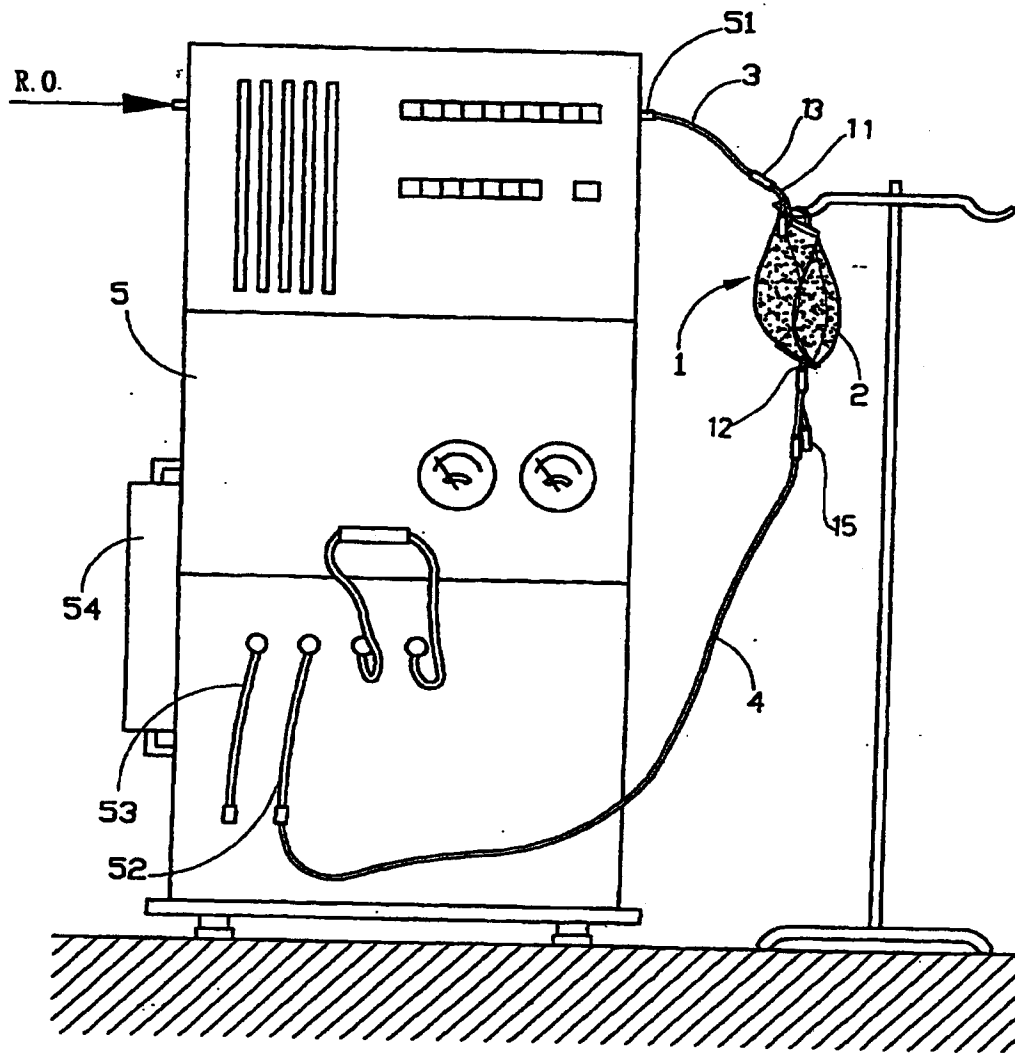


Fig.1

DE 200 08 860 U1

17.05.00

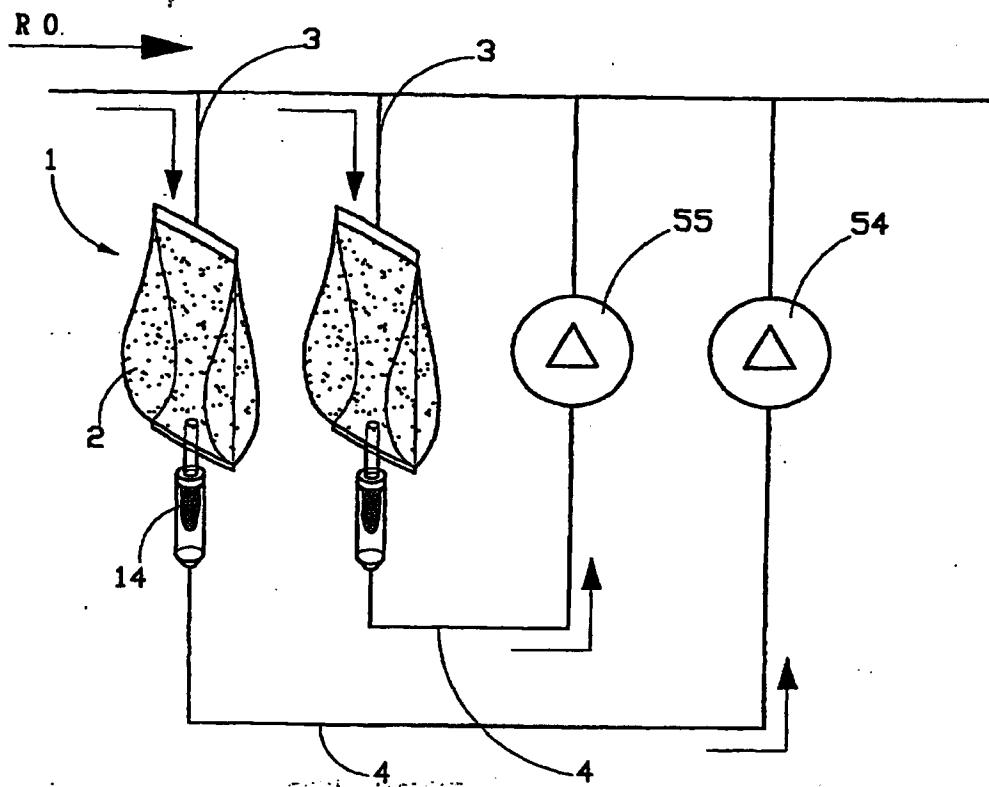


Fig.2

DE 200 08 860 U1

17.05.00

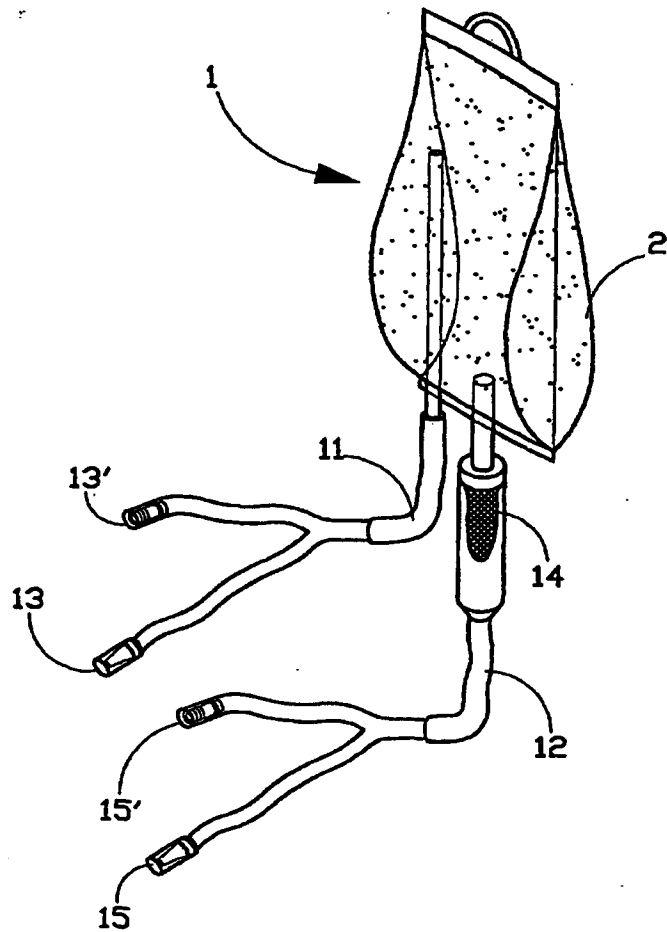


Fig.3

DE 200 08 860 U1

17.05.00

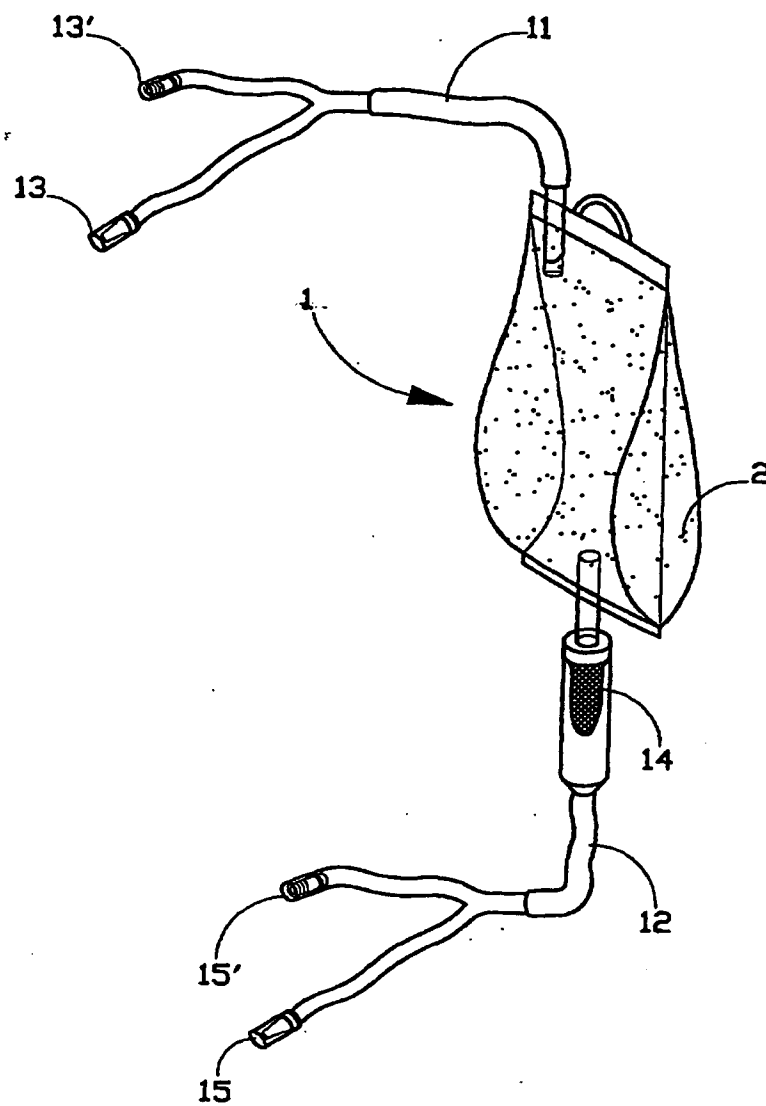


Fig.4

DE 200 08 860 U1

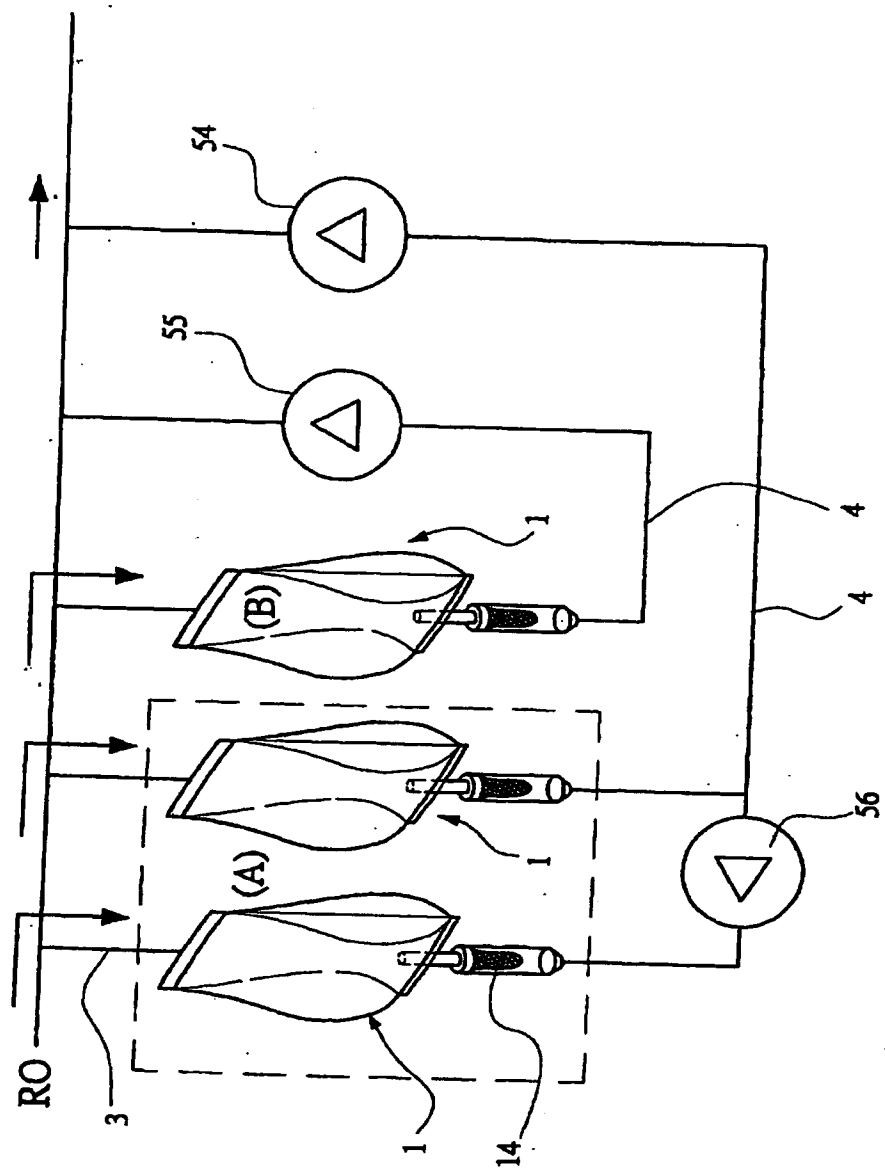


Fig.5